



**HUMAN CARE**  
Your Life. Your Way.



# neXus Accessory kit

User Manual





EN

### **Remove present Soft Bag**

Remove the present soft bag from the attachment.

FR

### **Retirez le Sac souple actuel**

Retirez le Sac souple actuel de la fixation.

DE


### **Vorhandenen Soft Bag entfernen**

Lösen Sie den vorhandenen Soft Bag von der Befestigung.

NL

### **Verwijder de aanwezige Soft Bag**

Haal de aanwezige Soft Bag van het bevestigingspunt.

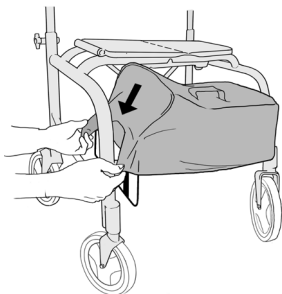

EN

### **Attach new soft bag**

Attach the new soft bag on the attachments.

FR

### **Attachez un nouveau Sac souple**

Attachez le nouveau Sac souple sur les fixations.

DE


### **Neuen Soft Bag anbringen**

Bringen Sie den neuen Soft Bag an den Befestigungsstellen an.

NL

### **Bevestig de nieuwe Soft Bag**

Bevestig de nieuwe Soft Bag aan de bevestigingspunten.

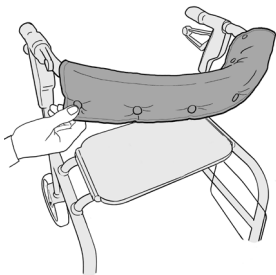

EN

### **Attach back strap**

Attach the back strap over the back rest using the push buttons.

FR

### **Attachez la sangle arrière**

Attachez la sangle arrière sur le dossier à l'aide des boutons-poussoirs.

DE

### **Rückengurt anbringen**

Befestigen Sie den Rückengurt über der Rückenlehne mithilfe der Druckknöpfe.

NL

### **Bevestig de achterband**

Bevestig de achterband aan de rugleuning met de drukknopen.

1.



2.



3.



EN

### Remove seat handle

1. Fold the rollator to make the strap more loose. Turn the handle.
2. Push the metal clip out from the groove.
3. Drag the strap through the holes in the seat.

FR

### Retirez la poignée du siège

1. Pliez le déambulateur pour que la sangle soit plus lâche. Tournez la poignée.
2. Poussez le clip en métal hors de la rainure.
3. Passez la sangle à travers les orifices dans le siège.

DE

### Sitzgriff entfernen

1. Klappen Sie den Rollator zusammen, damit der Gurt lockerer sitzt. Drehen Sie den Griff.
2. Drücken Sie die Metallspange durch den Schlitz.
3. Ziehen Sie den Gurt durch die Öffnungen im Sitz.

NL

### Verwijder de handgreep van de zitting

1. Klap de rollator dicht om de band lossier te maken. Draai de greep om.
2. Druk de metalen clips uit de gleuf.
3. Trek de band door de gaten in de zitting.

1.



2a.



2b.



EN

### **Attach new seat handle**

1. Feed the handle strap with pin from the top of the seat pad, with logo facing towards you.
2. Pull the strap through the holes in the seating mechanism.

FR

### **Attachez la nouvelle poignée de siège**

1. Faites passer la sangle de poignée avec la goupille depuis le haut du coussin de siège, avec le logo vers vous.
2. Passez la sangle à travers les orifices dans le mécanisme de l'assise.

DE

### **Neuen Sitzgriff anbringen**


1. Führen Sie den Griffgurt mit dem Endstück von der Oberseite des Sitzpolsters; das Logo zeigt dabei nach oben.
2. Ziehen Sie den Gurt durch die Öffnungen im Sitzmechanismus.

NL


### **Bevestig de nieuwe handgreep aan de zitting**

1. Voer de band met de pen in vanaf de bovenkant van het zitkussen met het logo naar u toegedraaid.
2. Trek de band door de gaten in het zittingsmechanisme.

3a.

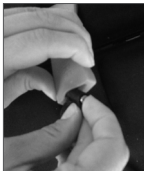

3b.

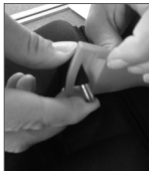

4.



EN

3. Pull the pin through the hole on the side of the handle.
4. Once through, place pin in the groove to secure.

FR

3. Tirez la goupille à travers l'orifice sur le côté de la poignée.
4. Une fois la goupille passée, placez-la dans la rainure pour la bloquer.

DE

3. Ziehen Sie das Endstück durch die seitliche Öffnung am Griff.
4. Drücken Sie das Endstück anschließend in den Schlitz, um den Gurt zu fixieren.

NL

3. Trek de pen door het gat aan de achterkant van de handgreep.
4. Als de pen door het gat is, plaatst u deze in de gleuf om vast te zetten.

### **HUMAN CARE SWEDEN (HQ)**

Årstaängsvägen 21C  
117 43 Stockholm  
Phone:- +46 8 665 35 00  
Fax:- +46 8 665 35 10  
info.se@humancaregroup.com  
www.humancare.se

### **HUMAN CARE CANADA**

10-155 Colonnade Road  
Ottawa, ON K2E 7K1  
Phone:- 613.723.6734  
Fax:- 613.723.1058  
info.ca@humancaregroup.com  
www.humancaregroup.com

### **HUMAN CARE HOLLAND**

Elspeterweg 124  
8076 PA Vierhouten  
Phone: 0577-412171  
Fax: 0577-412170  
info.nl@humancaregroup.com  
www.humancaregroup.com

### **HUMAN CARE USA**

4210 S. Industrial Drive, Suite 160  
Austin, TX 78744  
Phone: 512.476.7199  
Fax: 512.476.7190  
info.us@humancaregroup.com  
www.humancaregroup.com

### **HUMAN CARE AUSTRALIA**

Unit 9, 271 Wells Road  
Chelsea Heights, Victoria 3196  
Phone:- +61 3 8773 1111  
Fax:- +61 3 9773 4008  
info.au@humancaregroup.com  
www.humancaregroup.com



**HUMAN CARE**  
Your Life. Your Way.

